



Protocol voor het gebruik van Diphoterine®

Gebruik in geval van contaminaties van bijtende of corrosieve chemicaliën op de huid of in de ogen*



ACTIE BINNEN DE EERSTE MINUUT



Actie binnen
de eerste 10 seconden




Gebruik
1 LIS
50 ml

Actie tussen
seconde 10 - 60




Gebruik
1 LPM
500 ml

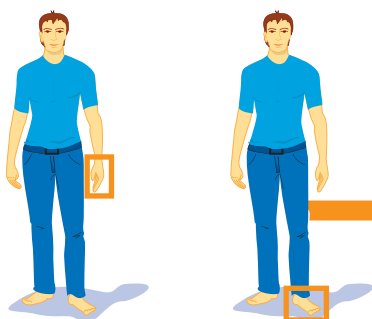

3% van het
lichaams-
oppervlak



Gebruik
1 MICRO DAP
100 ml

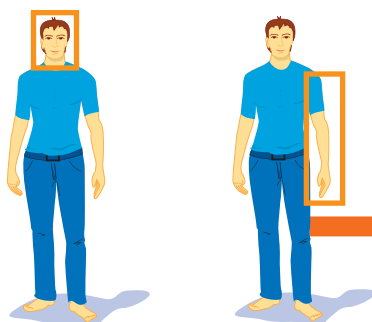

9% van het
lichaams-
oppervlak



Gebruik
1 MINI DAP
200 ml



> 9% van het
lichaams-
oppervlak



Gebruik
1 DAP
5 liter

* Beperkte doeltreffendheid op waterstoffluoride of derivaten ervan in een zuur milieu. In dat geval is het aangeraden om Hexafluorine te gebruiken

SPOELPROTOCOL MET DIPHOTERINE®

Start met de behandeling binnen de eerste minuut na de contaminatie.
Spoel eerst de **onbedekte lichaamsdelen**.

Verwijder kleren en/of doe contactlenzen uit.

Let op bij kleding die door warmte of kou aan de huid verkleefd is!

Vervolg zo snel mogelijk het spoelen van de **ontblote lichaamsdelen**. Trek geen kleren aan die bevuild zijn met de oogspoeling of met chemicaliën.

Bezoek een arts of specialist.

ALGEMENE INSTRUCTIES

Stel het spoelen nooit uit.

Voor een optimale werking: gebruik **eerst** Diphoterine®.

Gebruik de volledige inhoud van de verpakking.

Als er geen Diphoterine® beschikbaar is, gebruik dan water en spoel daarna zo snel mogelijk met Diphoterine®.

Indien de contacttijd **meer dan 1 minuut** bedraagt spoel dan met Diphoterine® het gecontamineerde lichaamsdeel 3 tot 5 keer zo lang als de contactduur.

In het geval van langere blootstelling bij opspattingen in het oog is het niet nodig om de ogen meer dan 15 minuten te spoelen.

Ga hierna onmiddellijk naar een arts voor medisch advies.

Na een active oogspoeling is het aanbevolen om **Afterwash II**® te gebruiken om het fysiologisch evenwicht van het oog sneller te herstellen.

Als het **mondslijmvlies** door de contaminatie is aangetast: spoel de mond met Diphoterine® en spuw de oplossing daarna uit.

Als het **oorkanaal is aangetast**, spoel dit zo snel mogelijk met Diphoterine® door de 500 ml in het kanaal te druppelen. Kantel het hoofd zodat de vloeistof uit het oor kan.

Zoals altijd bij het eenzijdig spoelen van één oor met een vloeistof op kamertemperatuur kan duizeligheid optreden zonder ernstige gevolgen. Dit gevoel zal na een paar minuten vanzelf verdwijnen.

Busje	Gemiddelde diffusietijd
Lis (50ml)	30 seconden
Micro DAP (100ml)	50 seconden
Mini DAP (200ml)	1 minuut 30 seconden
LPM (500ml)	3 minuten
DAP (5l)	5 minuten



www.vdpmedical.com

* Beperkte doeltreffendheid op waterstoffluoride of derivaten ervan in een zuur milieu. In dat geval is het aangeraden om Hexafluorine te gebruiken