


Transfusiesysteem – onbelucht - bijspuitpunt

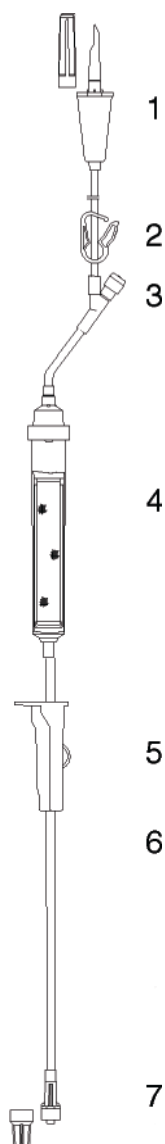

1. Onbeluchte kunststofnaald. De speciale vorm vereenvoudigt het aanprikken van infuuspooten en garandeert een veilige connectie. De beschermkap waarborgt de inwendige steriliteit .
2. Open/dicht klem.
3. Latexvrij bijspuitpunt voor het aansluiten van een koppelsysteem of toedienen van medicatie.
4. Druppelkamer, transparant voor een nauwkeurige controle van de ingestelde druppelsnelheid en markeringsring voor eenvoudige niveaubepaling. (20 druppels / 1 ml)
Het 200 µm filter (opp. 23,5 cm²) zorgt voor een goede filtratie, ook voor meerdere zakken bloed.
5. Precisie druppelregelaar voor het nauwkeurig instellen van de gewenste infuussnelheid. Ook bij langdurige instelling blijft de nauwkeurigheid gehandhaafd. (± 10 %)
Tevens klem voor afklemmen of bevestigen infuusslang.
6. Transparante flexibele PVC infuusslang i.d. 3.0 mm.
7. Luer-lock aansluiting voor een gemakkelijke en veilige koppeling. Inclusief FlowStop beschermkap die de inwendige steriliteit waarborgt en voorkomt lekkage van vloeistof tijdens vullen van het toedieningssysteem door geïntegreerd hydrofoob filter.

Bestelnr.	Omschrijving	Verpakking
455626	Transfusiesysteem, onbelucht, latexvrij bijspuitpunt, FlowStop. Lengte ± 230 cm.	100 stuks