



Een compleet assortiment speciale accessoires

Amika-rugtas

Groot



Amika-rugtas

Klein



Amika-tafelstandaard



Technische gegevens

Voeding

Loopsnelheid:

- 1 - 100 ml (stappen van 1 ml/u).
- 100 - 600 ml/u (stappen van 5 ml/u).

Nauwkeurigheid loopsnelheid:

+/- 7% bij 50 ml/u.

Voedingmodus:

Continu.

Priming:

Automatisch, semi-automatisch, manueel.

Teller:

Cumulatieve aanduiding voedingsvolume van 0.001 tot 99.999 L.

Datalogger:

Voedingsgeschiedenis: 250 events.
Alarmgeschiedenis: 250 events.

Nachtmodus:

De nachtmodus dempt de helderheid van het scherm en het aan/uit-lampje.

Toetsenbordvergrendeling:

Uitschakelen toetsenbord om onbedoeld indrukken van toetsen te voorkomen.

Vergrendeling instellingen:

Een toegangscode voorkomt dat de patiënt instellingen kan wijzigen.

Overige instellingen:

In-/uitschakelen doelvolumen, aanpassen geluidsniveau, instellen contrast en helderheid, instellen tijd tussen bericht dat doelvolumen bijna is bereikt en bericht dat doelvolumen is bereikt.

Beoogd gebruik:

Uitsluitend voor gebruik met enterale voeding.

Informatie / alarmen

Pompstatus:

- Toediening is bezig: druppelanimatie.
- Toediening is gestopt: weergave stopsymbool.
- Toediening is in wachtstand (tijdens bolusintervaltijd): druppelanimatie

Informatie:

Maximale volume bijna bereikt, batterij bijna leeg, technische gegevens beschikbaar via het menu.

Alarmen:

Doelvolumen bijna bereikt, deur geopend, verkeerde set-installatie, stroomafwaartse occlusie, stroomopwaartse occlusie, lege zak / lucht in lijn, lege batterij, technische fout. Alle alarmen vertegenwoordigd door lichtindicatoren, pictogrammen en geluiden.

Detectietijd occlusie:

< 6 min (bij 50 ml/u - met water).

Detectietijd zak leeg / lucht in lijn:

< 5 min (bij 50 ml/u - met water).

Technische specificaties

Pompmechanisme:

Lineair peristaltisch pompmechanisme.

Scherf:

Monochroom LCD 40 x 59 mm (160 x 240 pixels).

Paalklem van de houder:

Flexibele klem voor bevestiging aan een wandarm (10 - 35 mm) of een standaard (Ø 8 - 40 mm).

Afmetingen (hxbxd) / Gewicht:

- Pomp: 138 x 128 x 48 mm / 610 g.
- Pomphouder: 185 x 110 x 85 mm / 350 g.

Batterij:

- 4.8 V; 2.2 Ah NiMH (nikkel-metaalhydride).
- Batterijduur 24 u +/- 5% bij 125 ml/u.
- Indicatielampje batterijlading op het scherm.
- Oplaadtijd batterij: 6 u.

Compatibiliteitsstandaard:

- IEC 60 601-1, IEC 60 601-1-2 en IEC 60601-2-24
- CE 0123-markering voldoet aan de Europese Richtlijn 93/42/EEG inzake medische hulpmiddelen.

Waterdichtheid:

- Pomp: IP35.
- Pomphouder: IP32.
- AC-adapter: IP41.

Elektrische conformiteit:

- Bescherming tegen lekstroom: Defibrillatiebestendig type CF 
- Bescherming tegen elektrische schokken: Klasse II.

Netvoeding:

100 - 240 VAC / 50 - 60 Hz.

Energieverbruik:

Maximaal 7 W bij normale werking (standaard).

Geluid:

Circa 25,8 dBA op 1 m (achtergrondgeluid 18,3 dBA).

Materiaal behuizing:

ABS.

Amika-toedieningsset

Free-flowbescherming:

Alle sets zijn ontworpen met de Amika-klem die het risico op free-flow voorkomt wanneer de deur is geopend en de set is losgekoppeld.

Lengte toedieningssysteem:

Circa 2,50 m, plaats anti-free-flow Amika-klem instelbaar.

Materialen:

Alle Amika slangtoedieningssets zijn DEHP-vrij en latex-vrij.

Amika-accessoires

Amika-rugtas:

Voor ambulant gebruik. Verkrijgbaar als groot en klein model.

Universele tafelstandaard:

Een alternatieve standaard voor plaatsing van Amika op een tafel.

Amika is een geregistreerd handelsmerk van Fresenius Kabi voor Nederland en België. Als gevolg van ons beleid van continue productontwikkeling en veranderingen van normen kunnen de beschreven functies worden gewijzigd. Neem voor de meest recente informatie contact met ons op. Afbeeldingen zijn niet bindend.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi Nederland B.V.
Amersfoortseweg 10E
3712 BC Huis ter Heide
Nederland
Tel.: 0800 - 022 19 05
info.nl@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.nl

Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 9
2627 Schelle, België
Tel.: +32 38 30 73 00

info.be@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.be



2019-11-14/27



**FRESENIUS
KABI**

caring for life


Amika

Enterale Voedingspomp





Gemakkelijk in gebruik voor ziekenhuis, instelling en thuiszorg

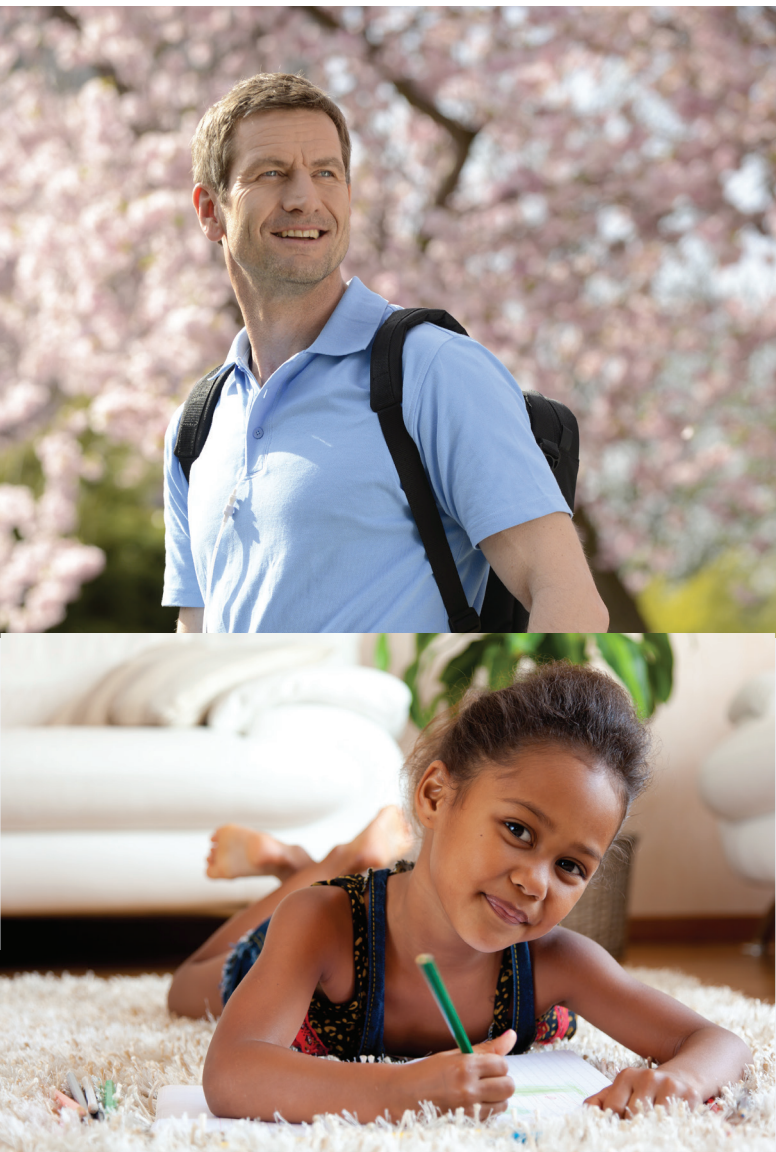

Van samenstelling tot toediening, de complete voedingsoplossing van Fresenius Kabi

Ontworpen voor verbeterde veiligheid

- Specifieke enterale toedieningssets.
- Een eenvoudige, veelzijdige grafische interface voor elk soort klinische praktijk, van basis tot geavanceerd, voor betere patiëntveiligheid.
- Toetsenblok- en instellingen met vergrendelfuncties voor een veiliger gebruik van Amika.



Amika

Uitgebalanceerde toediening van voeding

Amika is een gemakkelijk te gebruiken en comfortabele voedingspomp voor chronisch en ernstig zieke patiënten, ontworpen voor een veiliger en intuïtief gebruik in de voedingszorg. Samen met zijn speciale accessoires bieden ze een systeem dat enterale voeding vergemakkelijkt voor zowel zorgverleners als patiënten.

Gebruiksvriendelijke pomp

- Werkt geruisloos.
- Intuïtief ontwerp met lange accuduur.
- Instellingen aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker.
- Een compleet assortiment speciale accessoires.

Alarmlampje




Anti-free-flow veiligheidsklem



Nauwkeurig en intuïtief in gebruik

- Gangbare grafische symbolen voor iedereen te begrijpen.
- Ergonomisch en compacte voedingspomp.
- Alle informatie in één oogopslag van het scherm af te lezen.

Interface gebaseerde symbolen voor de gebruiker

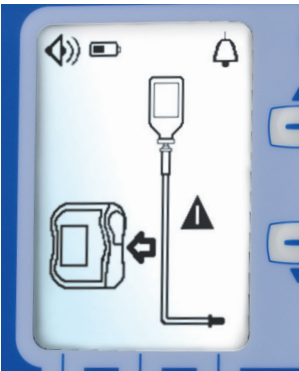

Directe toegang tot belangrijke functies



Instellingen opslaan en vergrendelen met een toegangscode

